


SMART Care Control®

Pflege – intelligent und individuell



.bock^{///}

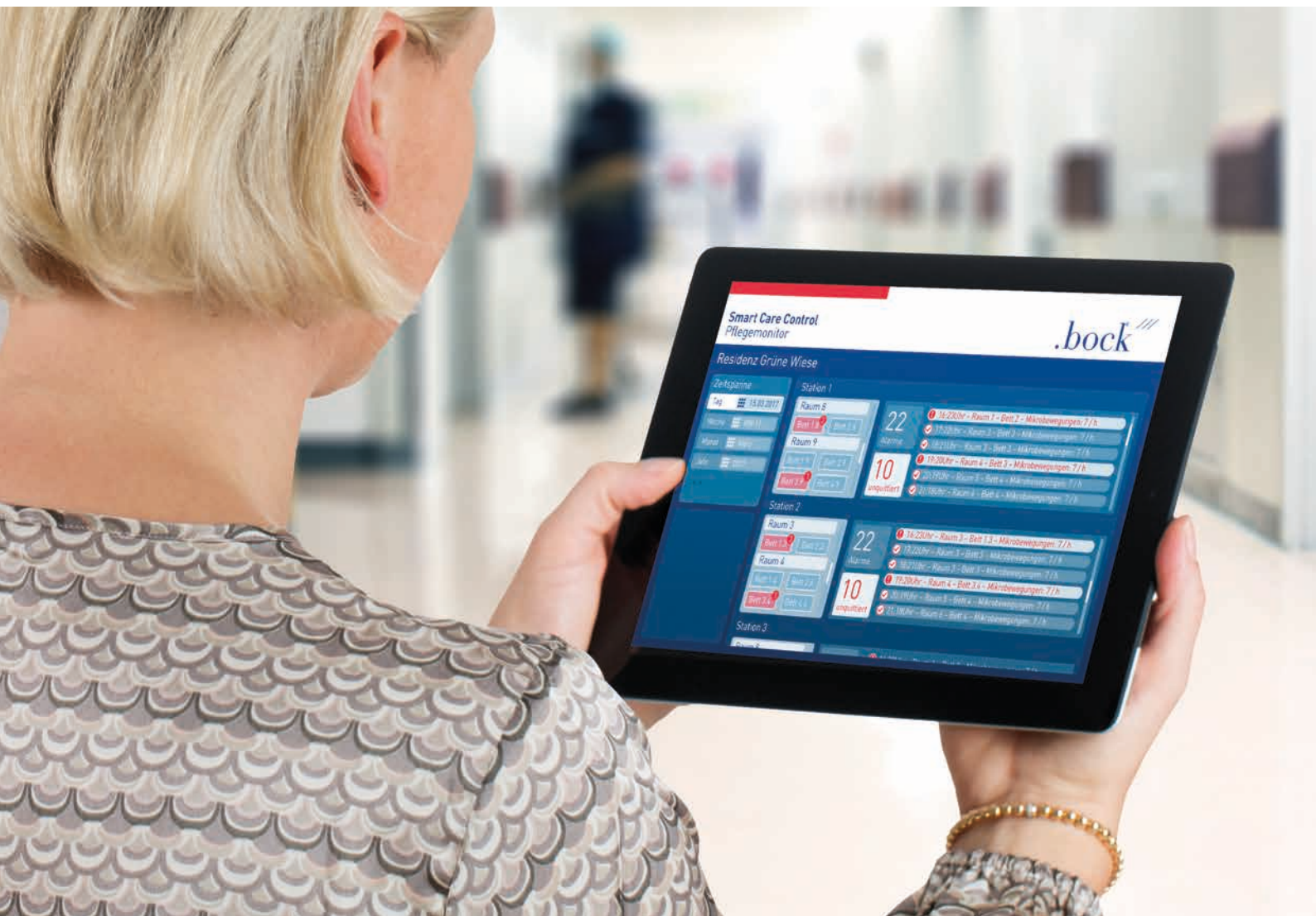

Sensorgestütztes Monitoringsystem



SMART Care Control verknüpft individuelles, sensorgestütztes Bewohnermonitoring mit drahtlosen Benachrichtigungsfunktionen und spezifisch programmierbaren Bettfunktionen. Das intelligente Monitoring von SMART Care Control gibt Bewohnern und Angehörigen die Sicherheit, dass Pflegekräfte sofort informiert sind, wenn etwas nicht in Ordnung ist.

// Bed Exit Monitor mit Bettkanten-Sensitivität

// Erfassung Zeitraum Bettabwesenheit

// Erkennen von Mikro- und Makrobewegungen

// Sensorik-Funktionen modular erweiterbar



Die Bed-Exit-Sensormatte registriert neben der Bettanwesenheit auch die Bewegungsprofile des Bewohners im Bett.

Intelligente Bettsteuerung

Die programmierbare Bettsteuerung kann spezifisch für jeden Bewohner bevorzugte Bettpositionen abspeichern – und falls es therapeutisch notwendig sein sollte, auch die Grenzen definieren, innerhalb derer der Bewohner die Betteinstellung selbst mit dem gewohnten Handschalter verändern kann.

SMART Care Control nutzt etablierte Funktechnologie zur gesicherten Datenübertragung.

Die technische Funktionalität von Pflegebetten mit SMART Care Control kann dadurch auch per Fernwartung geprüft werden. Das spart Ihnen Zeit und schützt Ihre Investition.

Die SMART Care Control Apps

SMART Care Control verknüpft die Daten der integrierten Sensoren und der Technik und stellt sie grafisch dar. Das verschafft Ihnen einen wertvollen, einzigartigen Überblick über das Wohlergehen Ihrer Bewohner – ohne unnötige Kontrollbesuche. Sie können sich auf die wichtigen Aufgaben konzentrieren!

SMART Care Control speichert alle Daten automatisch und stellt sie für die Dokumentation zur Verfügung. Bei Rückfragen haben Sie mit SMART Care Control die Sicherheit eines umfassenden, dokumentierten Nachweises.

Mit der SMART Care Control Navigator-App steuern Sie die technischen Funktionen des Pflegebettes.


Mit der SMART Care Control Monitor-App haben Sie jederzeit mobil den Überblick über die Daten und Meldefunktionen der Sensorik.

// Intuitiv bedienbar für Smartphone und Tablet

// Drahtlose Melde- und Monitoringfunktionen

// Individuell für jedes Bett eingerichtet

// Dokumentation aller Daten

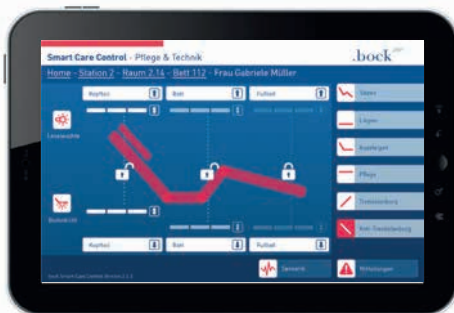

SMART Care Control kann für jeden Bewohner individuell konfiguriert werden:

- Definition der Meldefunktionen
- Programmierung bevorzugter Bettpositionen
- Dokumentation der Bewegungsmuster im Bett



Jederzeit die gesamte Wohneinheit im Blick

Die innovative App bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die relevanten Daten aller Betten in Ihrer Wohneinheit – unabhängig davon, wo im Haus Sie sich gerade aufhalten.



Zeitersparnis durch wertvolle Information

Die grafisch dargestellten Daten zeigen unter anderem Bewegungsprofile der Bewohner im Bett – eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Dekubitusprophylaxe.



Qualifizierte Meldungen für eine situationsgerechte Pflege

SMART Care Control unterstützt Sie dabei, den Überblick zu behalten: Die App signalisiert Ihnen, welcher Ihrer Bewohner gerade Hilfe benötigt – und zeigt Ihnen auch, wer im Moment eigenständig zurechtkommt. Dies ermöglicht den Pflegekräften ein situationsgerechtes Reagieren und spart somit Zeit und Wege.

SMART Care Control bietet 3 Arten von Meldungen, die individuell für jeden Bewohner konfiguriert werden können.

- Einfache Meldung als Statusbericht in der App
- Stiller Alarm als Hinweis auf dem Smartphone
- Direkter Schwesternruf über die hauseigene Rufanlage

// Schnelle Übersicht über alle Betten der Wohneinheit mit Tablet- und Smartphone-App

// Situationsgerechte Meldefunktionen

// Mehr Freiheit und mehr Sicherheit für Bewohner

// Arbeitserleichterung für die Pflegekräfte



practico alu SCC – das erste Pflegebett, das mit der zukunfts-fähigen SMART Care Control Technologie erhältlich ist.

Das intelligente Pflegebett

Das practico alu SCC vereint alle Anforderungen eines modernen und durchdachten Pflegebettes – und bringt das Plus an Intelligenz mit: Die SMART Care Control Technologie ist bereits vorgerüstet.

Das practico alu SCC ist erweiterungsfähig:

Ergänzende Sensoren können auch nachträglich in das System integriert werden und ermöglichen eine Erweiterung der intelligenten Funktionen.

- // Ausgestattet mit SMART Care Control
- // Individuell programmierbare Bettfunktionen
- // Höhenverstellbar von 25 - 80 cm
- // Ergonomische Rückenlehne zur Unterstützung einer physiologischen Sitzposition
- // Werkzeuglose Bettverlängerung auf 220 cm inklusive Verlängerung der Seitensicherung

.bock[®]///



Sie wünschen sich mehr Informationen?

Weitere Informationen über SMART Care Control finden Sie bequem im Internet. Scannen Sie einfach den abgebildeten QR-Code, und Sie gelangen automatisch auf die Website.

Möchten Sie sich in einem persönlichen Gespräch beraten lassen?

Sie erreichen unser engagiertes Team per Telefon oder E-Mail. Kontaktieren Sie uns einfach!

Hermann Bock GmbH
Nickelstraße 12
33415 Verl
Germany

Telefon: +49 (0)5246 9205-0
Telefax: +49 (0)5246 9205-25
E-Mail: info@bock.net
Internet: www.bock.net



® eingetragenes Warenzeichen
Bestell-Nr.: 890.02312
Stand: 04 | 2017
Technische Änderungen vorbehalten.