

## Die Produktvorteile des practico ultraniedrig:

- + Niedrigbett mit besonders bodennaher Schlafposition: komfortabel, selbstbestimmt und sicher
- + Verlässliche Sturzfolgenprophylaxe
- + Gleiten statt Fallen: Sicherheit ohne Fixierung auch für unruhige Schläfer
- + Enorme Höhenverstellung von 9,5 – 80 cm
- + Besonderer Bewohner- und Pflegekomfort durch Kopftief-/Beintief-Lagerung
- + Integrierte, werkzeuglose Bettverlängerung auf 210 cm und 220 cm
- + Serienmäßige Unterbettbeleuchtung für mehr Sicherheit in der Nacht

practico ultraniedrig  
9.5|80

Maße	
Außenmaß	102 x 240 cm
Liegefläche	90 x 200 cm
Bettverlängerung bis	220 cm
Höhenverstellung	9,5 - 80 cm
Lifterunterfahrbarkeit	> 15 cm

Gewichte	
Bettgewicht	ca. 165 kg
Sichere Arbeitslast	220 kg
Max. Personengewicht	185 kg

Seitensicherung	
Material: Holz	
Unterteilung	durchgehend lang geteilt kurz geteilt kopfsseitig
Höhe*:	
- Mit Federholzleisten	39,5 cm
- Mit ripolux® neo	35 cm

Weitere Ausstattungsmerkmale	
Endstücke	31, 32

**Motor**  
Spritzwasserschutz nach IPX4, hochwertiges Spiralkabel mit Zugentlastung und Knickschutz, \*SMPS Steckertrafo mit Schutzkleinspannung und dadurch Sicherheit ab der Steckdose

\*Ab Juli 2019

\*Abstand zwischen Oberkante Liegefläche und Oberkante hochgezogene Seitensicherung



Mobilisierung durch Endstück 31 mit Handlauf



Große Stabilität in jeder Höhe durch die Hubsäule



Matratzenausgleich mit zusätzlicher Auleiste verhindert das Durchrutschen der Matratze

www.bock.net

Hermann Bock GmbH  
Nickelstraße 12  
D-33415 Verl

Telefon +49 5246 9205 0  
Telefax +49 5246 9205 25  
E-Mail info@bock.net



practico ultraniedrig  
9.5|80

## Der neue Superlativ: ultraniedrig, ultrapraktisch

Unser Niedrigbett mit höchstem Komfort.


**.bock** <sup>///</sup>  
100 JAHRE

®eingetragenes Warenzeichen  
Stand: 05 | 2019  
Technische Änderungen vorbehalten

**.bock** <sup>///</sup>  
100 JAHRE

practico ultraniedrig 9.5|80

## Für einen tiefen und sicheren Schlaf: Unser Niedrigstbett mit höchstem Komfort

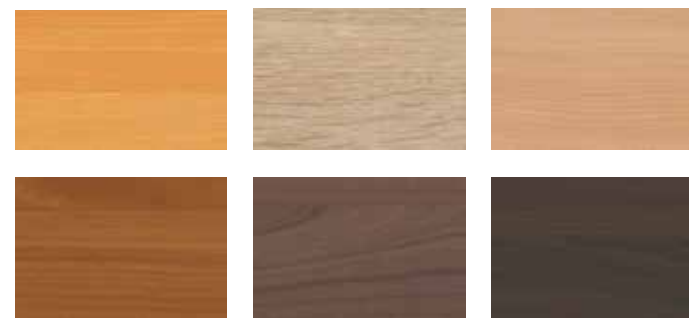

Igor (28), Hamburg

„In diesem Bett fühlen sich ängstliche oder sturzgefährdete Bewohner einfach sicher.“

Der Superlativ im Segment der Niedrigstbetten: Das **practico ultraniedrig 9.5|80** ermöglicht ein bodennahes, angstfreies Liegen und schützt unruhige Schläfer vor sturzbedingten Verletzungen – im Einklang mit dem Werdenfelser Weg **ohne freiheitsentziehende oder fixierende Maßnahmen**. Es lässt sich so tief absenken, dass der Bewohner im Falle eines Falles **gefahrlos aus dem Bett gleitet** und nicht fällt. So kann auf das zeitraubende Auslegen von Abrollmatten verzichtet werden, die zudem die selbstbestimmte Mobilität einschränken können.

Durch die **barrierefreie Niedrigposition** ist es zudem auch für viele eingeschränkt mobile Menschen möglich, im „Vierfüßlerstand“ selbstständig ins Bett zurückzukehren. Dank der maximal einstellbaren Höhe von 80 cm genießt auch Ihr Pflegepersonal komfortable Arbeitsbedingungen. Ein weiterer Vorteil des practico ultraniedrig 9.5|80 ist die **spezielle Hubsäulenmechanik am Kopf- und Fußteil**. Hierdurch ist unser Niedrigstbett **komplett unterfahrbar** und leicht zu reinigen.



Mehr Informationen:



[www.bock.net/x67u](http://www.bock.net/x67u)

