

# Jederzeit pflegebereit: Das wandelbare Komfort-Pflegebett von bock®.

practico 25|80 plus

.bock®



**Umfassend ausgestattet:** Das practico 25|80 plus in modernem Holzdekor, hier Sonoma Eiche hell. Das niedrige Fußende und die optionale kopfseitige Seitensicherung SR3 runden das wohnliche Pflegebett perfekt ab.



**Mehr Wohnlichkeit:** Das practico 25|80 plus in Stoff oder Kunstleder für noch mehr Komfort und schönstes Raumdesign. Hier in Kunstleder skai toledo birch.

# Sicherheit mit Plus: Das wandelbare Komfort-Pflegebett

**Traumhaft schlummern und das Leben genießen:** Das practico 25|80 plus ist ein hochwertiges Komfort-Pflegebett, das Schlafkomfort mit stilvoller Wohnlichkeit verbindet und dabei jederzeit zu einem professionellen Pflegebett wandelbar ist. So ist das practico 25|80 plus serienmäßig mit einem kabelgebundenem Handschalter ausgestattet, der die Anwahl individueller Sitz- oder Relaxpositionen ermöglicht. Das Pflegebett ist in verschiedenen Bettbreiten und -längen erhältlich und passt dank einer erstklassigen Auswahl an Dekoren, Farben und Bezügen zu jedem Einrichtungsstil. Alle Holzdekore, Stoffe und Kunstleder sind strapazierfähig und leicht zu reinigen.

**Pflege? Vielleicht später:** Das practico 25|80 plus lässt sich bei Bedarf mit verschiedenen Seitensicherungsvarianten und Zubehör ergänzen und damit zu einem vollwertigen Pflegebett erweitern.



**Praktisches Zubehör:** Für eine individuelle und situationsgerechte Bettausstattung. Hier abgebildet die Aufstehhilfe.



# practico 25|80 plus: die Vorteile im Überblick





## Elegant Lightness Farbkonzept für eine harmonische Atmosphäre

Das practico 25|80 plus ist dank einer erstklassigen Auswahl an Farben und Stoffen sehr vielseitig zu kombinieren. So passt es sich optimal Ihrem persönlichen Einrichtungsstil an und lässt sich wunderbar und unauffällig in vorhandene Farbkonzepte integrieren. Bei der Auswahl unserer Stoffe orientieren wir uns sowohl an aktuelle Wohntrends

als auch an pflegerische Aspekte. Insbesondere bei Demenzerkrankten kommt es auf eine gute Farbgestaltung an. Beispielsweise spricht ein zarter Rosé-Ton, wie der hier abgebildete Bezug liv 3551, das Langzeitgedächtnis an und wird insgesamt als sehr angenehm empfunden.




# practico 25|80 plus: umfassend ausgestattet

## Komfort-Vorteile:

- ⊕ Ergonomische Rückenlehne und Matratzenausgleich sorgen für eine bequeme und physiologische Sitzposition
- ⊕ Übersichtlicher Handschalter mit vielen Verstellmöglichkeiten und Sperrfunktion
- ⊕ Zwei verschiedene Liegeflächensysteme für individuellen Liege-Komfort
- ⊕ Vielfältige Sitz- und Liegeeinstellungen sowie Liegeflächensysteme bieten erhöhten individuellen Liege-Komfort

## Pflege-Vorteile:

- ⊕ Großer Höhenverstellbereich: Sicheres Liegen bei der niedrigsten Höhe von nur 25 cm – optimale Pflege bei der maximalen Höhe von 80 cm
- ⊕ 4-geteilte Liegefläche, hier mit Federholzleisten und Zonenverstärkung
- ⊕ Zentralverriegelung und Richtungsfeststeller für alle vier Rollen
- ⊕ Optional mit verschiedenen Seitensicherungen ausstattbar, hier SR3 kopfseitig

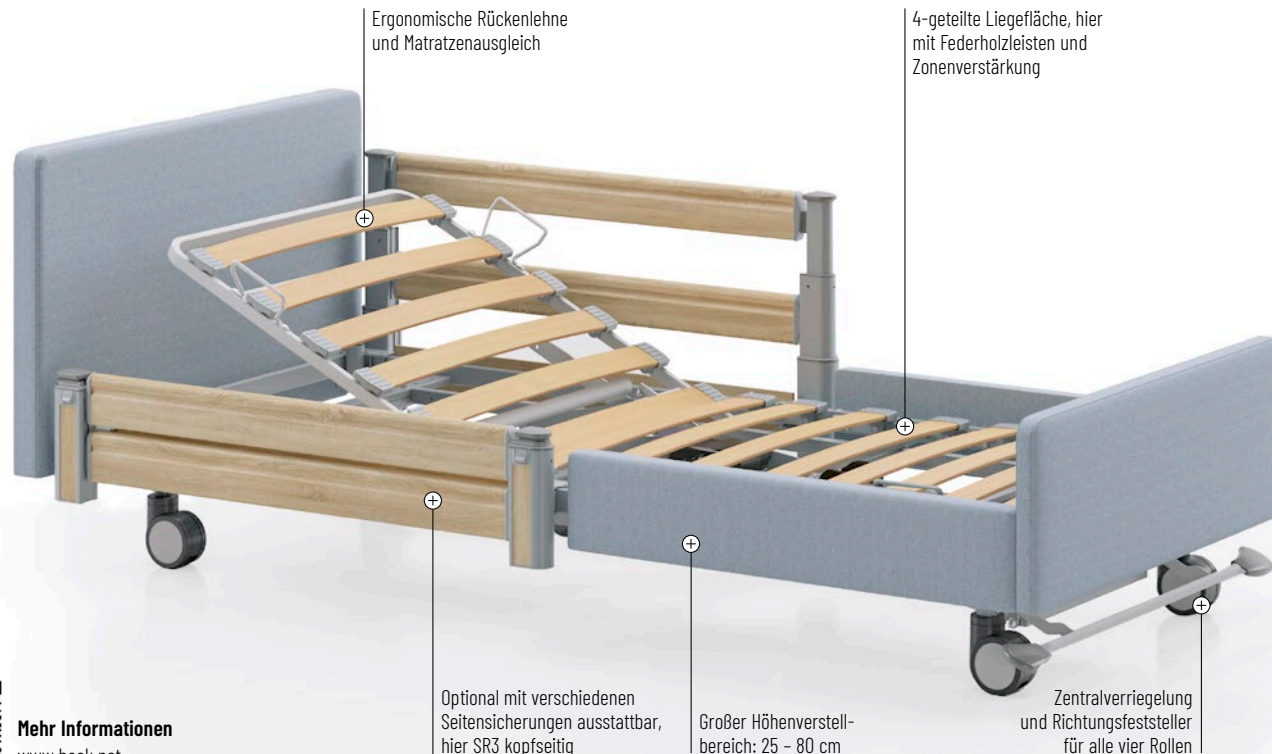


Mehr Informationen  
www.bock.net

practico 25 80 plus	
<b>Maße</b>	
Außenmaß	ca. 105 x 218 cm
Liegefläche	90 x 200 cm
Sondermaße	Breite 100, 120 cm Länge 220 cm
Höhenverstellung	25-80 cm
Lifterunterfahrbarkeit	15 cm
<b>Gewichte</b>	
Bettgewicht	ca. 140 kg
Sichere Arbeitslast	220 kg
Max. Personengewicht	185 kg
<b>Seitensicherungen</b>	
Systeme	SR1 oder SR3
Unterteilung	durchgehend lang geteilt kopfseitig ohne Sicherung
Höhe*:	
- Mit Federholzleisten	39,5 cm
- Mit ripolux® neo	35 cm
<b>Motor</b>	
Spritzwasserschutz nach IPX4, hochwertiges Spiralkabel mit Zugentlastung und Knickschutz, SMPS Steckertrafo mit Schutzkleinspannung und dadurch Sicherheit ab der Steckdose, Optional: CPR-Notabsenkung	
*Abstand zwischen Oberkante Liegefläche und Oberkante hochgezogene Seitensicherung bei SR3	
<b>i</b>	

# Individuell konfigurierbar: nach Wunsch unterfedert

## Federholzleisten mit Zonenverstärkung

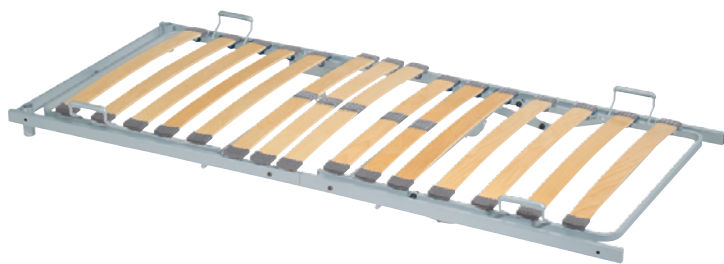

### Die Grundvariante.

Die bewährten Federholzleisten mit Zonenverstärkung gibt es bei bock bereits in der Standardausstattung. Die Zonenverstärkung im Gesäßbereich sorgt für einen hohen Komfort, insbesondere auch in sitzender Position. Die Federholzleisten sind in flexiblen und langlebigen Kautschuk-Halterungen gesichert. Dadurch wird bei Bedarf ein einfacher Austausch ermöglicht.

### Komfort-Vorteile:

- ⊕ Komfortabel und ergonomisch

### Pflege-Vorteile:

- ⊕ Pflegeleicht und langlebig

## ripolux® neo



### Ein Unterfederungssystem - perfekt für alle.

Das flexible Unterfederungssystem ripolux® neo passt sich genau der Druckverteilung des Körpers an, für eine bequeme, ergonomische Lagerung in allen Sitz- und Liegepositionen.

### Komfort-Vorteile:

- ⊕ Federn in 2 verschiedenen Härtegraden für individuellen Liegekomfort.  
Auf Anfrage ist eine Weiche erhältlich
- ⊕ Druckausgleich dank unabhängiger und punktgenauer Federwege

### Pflege-Vorteile:

- ⊕ Werkzeuglose und individuelle Liegeflächen-Konfiguration
- ⊕ Keine Feuchtigkeitsaufnahme und ideale Unterlüftung



# Individuell konfigurierbar: 2 Seitensicherungssysteme

## SR 1



- ⊕ Sanfte und leichte Handhabung
- ⊕ Hohe Flexibilität durch drei verschiedene Längen
- ⊕ Dezentres und gradliniges Design



## SR 3



- ⊕ Hohe Variantenvielfalt und verschiedene Dekore
- ⊕ Holme im Holzdekor für wohnliche Atmosphäre
- ⊕ Optional in der untersten Position verriegelbar







## Urban Jungle Farbkonzept für eine stimulierende Atmosphäre

Das practico 25|80 plus ist dank einer erstklassigen Auswahl an Farben und Stoffen sehr vielseitig zu kombinieren. So passt es sich optimal Ihrem persönlichen Einrichtungsstil an und lässt sich wunderbar und unauffällig in vorhandene Farbkonzepte integrieren.

Bei der Auswahl unserer Stoffe orientieren wir uns sowohl an aktuelle Wohntrends als auch an pflegerische Aspekte. Insbesondere bei Demenzerkrankten kommt es auf eine gute Farbgestaltung an. Beispielsweise wirken Grün-Töne harmonisierend und beruhigend, ohne müde zu machen, und sorgen insgesamt für eine sanfte und angenehme Stimulation.



# Zubehör

Für eine individuelle und situationsgerechte Bettenausstattung.

## Mobilitätshilfen



### Aufrichter Handgriff

Art.-Nr. 92228 A001



### Aufstehhilfe


Art.-Nr. auf Anfrage

## Aluminium-Rollenverkleidung



Art.-Nr. auf Anfrage

## riposan-Matratze RG 55 kg / m<sup>3</sup>

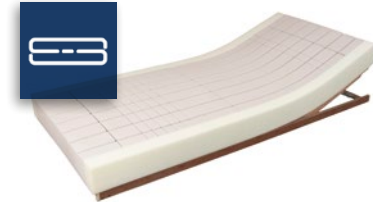

### PU-Schaumstoffmatratze, ca 14 cm hoch

- 5-Zonen Spezial-Antidekubitusmatratze
- 2-seitiger Reißverschluss
- Bezug Doppeltuchgestrick
- Allergiker geeignet und Schmutzunempfindlich
- Waschbar bis 95 °C

Art.-Nr. auf Anfrage

## Beleuchtung



### LED-Bettleuchte Modell G

Anschluss an Steuerbox,  
bedienbar per Handschalter  
Art.-Nr. 100.04164



### LED-Bettleuchte Modell E

mit externem Steckernetzteil  
und Kippschalter  
Art.-Nr. 207.00196



### Unterbettleuchte

Anschluss an Steuerbox,  
bedienbar per Handschalter  
Art.-Nr. auf Anfrage

# Endstücke, Bezugstoffe und Dekore Gestalten Sie Ihr persönliches Bett



Das practico 25|80 plus ist dank einer erstklassigen Auswahl an Farben, Stoffen und Holzdekoren sehr vielseitig zu kombinieren. So passt es sich optimal Ihrem persönlichen Einrichtungsstil an und lässt sich wunderbar und unauffällig in vorhandene Farbkonzepte integrieren. Alle Materialien sind strapazierfähig und leicht zu reinigen. Das elegante Design und die hochwertige Ausstattung machen das practico 25|80 plus zu einem stilvollen Möbel, das sich harmonisch in jedes Wohnambiente integriert.



**Liv DELIGARD 3551**



**Liv DELIGARD 5550**



**Tiba DELIGARD beige**



**Brooks DELIGARD 6553**



**Skai toledo birch**



**Kombination: Skai Toledo birch und Sonoma Eiche**


# Endstücke, Bezugstoffe und Dekore Gestalten Sie Ihr persönliches Bett




Egal ob Sie es bevorzugen, ein weiches Polster oder das natürliche Holzgefühl zu genießen – wir bieten Ihnen die Wahl zwischen zwei verschiedenen Betthaupt-Höhen an, um ein individuelles Komfortbett zu gestalten, das perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Gestalten Sie Ihr eigenes Traumbett und machen Sie Ihren Schlaf zu einem unvergleichlichen Erlebnis.



## Holz-Dekore

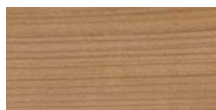

Kirsche Havanna

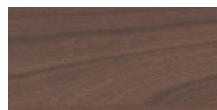

Madison Walnut



Ahorn After Eight



Buche gedämpft



Königsahorn



Sonoma Eiche hell



Buche Blume



Weiß



Mehr Informationen  
[www.bock.net](http://www.bock.net)



Das practico 25180 plus in Stoff- oder Kunstleder für noch mehr Komfort und schönsten Raumdesign.

**.bock**<sup>®</sup> 

© eingetragenes Warenzeichen  
Bestellnr.: 880.02149  
Stand: 06 | 2023  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Bildnachweise: Nicola Rehage, Gütersloh  
Creanimation, Münster

Hermann Bock GmbH  
Nickelstraße 12  
33415 Verl  
Deutschland

Telefon: +49 (0) 5246 9205 0  
Telefax: +49 (0) 5246 9205 25  
Internet: [www.bock.net](http://www.bock.net)  
E-Mail: [info@bock.net](mailto:info@bock.net)